

Mitglied der Leistungsgemeinschaft

HÖREX
Ihre HörExperten

Hörsystem- **Pflegefibel**



Die **perfekte Pflege** für Ihre
Hörsysteme und Ohrpassstücke

Vorwort	S. 3
Tipps und wichtige Hinweise	S. 4
Falls einmal etwas nicht funktioniert	S. 10
Übersicht der HÖREX-Pflegeprodukte	S. 14
Anleitung zur Reinigung und Trocknung Ihres HdO- oder IdO-Hörsystems	S. 18
Der HÖREX Service-Verbund	S. 31

Gute Pflege zahlt sich aus!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bestimmt ist es Ihnen auch schon aufgefallen: Ein Hörsystem schenkt Ihnen eine ganz neue Lebensqualität. Sie können wieder aktiv an Gesprächen teilnehmen, nehmen Ihre Umwelt wieder viel deutlicher wahr, und auch Ihre Mitmenschen werden Ihr Hörsystem zu schätzen wissen. Damit Ihnen die Freude am neuen Hören lange erhalten bleibt, haben wir für Sie diese Pflegefibel zusammengestellt. Sie finden darin eine Menge nützlicher Tipps, die Ihnen helfen, Ihr hochwertiges Hörsystem optimal zu reinigen und zu pflegen. Denn Reinigung und Pflege müssen sein.

Lange Lebensdauer: Ihr Hörsystem entspricht dem neusten Stand der Technik. Voraussetzung für eine lange Lebensdauer ist die regelmäßige Pflege der Geräte durch Sie und die Wartung der hochwertigen Technik durch uns.

Die richtige Pflege: Mit speziellen Pflegeprodukten, die extra für die Pflege moderner Hörsysteme entwickelt wurden, können Sie die Funktionsfähigkeit und die Lebensdauer Ihrer Hörgeräte deutlich erhöhen. Pflege, die sich schnell bezahlt macht.

Die HÖREX Pflegeprodukte erhalten Sie nur in unserem Fachgeschäft.

Ihre neuen Hörsysteme – Wunderwerke der Technik

Hörsysteme bestehen aus vielen Kleinbauteilen sowie einer hochwertigen Mikroelektronik. Durch den täglichen Einsatz sind diese Geräte zwangsläufig vielen Einflüssen ausgesetzt, die zu irreparablen Schäden führen können. Daher empfiehlt es sich, die Hörsysteme sehr gut zu pflegen und auf die Erhaltung der Funktionsfähigkeit zu achten.



Deshalb finden Sie hier einige Tipps Ihres Hörgeräte- akustikers, die Sie unbedingt beachten sollten:

- Ihre Hörsysteme können bei starken Schlägen oder beim Herunterfallen beschädigt werden, da bereits bei einem Aufprall aus geringer Höhe die empfindliche Elektronik in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
- Schützen Sie Ihre Hörsysteme vor Staub und Schmutz. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger sauber und trocken sind, bevor Sie die Hörgeräte berühren. Der Mikrofoneingang ist nur wenige Zehntelmillimeter groß und kann durch Verschmutzung verstopft werden.
- Wenn Sie Körperpflegeprodukte wie z. B. Kosmetik oder Haarpflegemittel verwenden, legen Sie Ihre Hörgeräte ab, da fein zerstäubter Haarlack oder Makeup-Puder den Mikrofoneingang verstopfen und andere Bedienelemente verkleben kann.
- Schützen Sie Ihre Hörsysteme vor Wasser (Duschen / Schwimmen) und großer Hitzeeinwirkung (Sauna). Da bereits der Wasserdampf im Badezimmer die Systeme beschädigen kann, sollten Hörgeräte nicht im Badezimmer aufbewahrt werden. Legen Sie die Geräte zum Duschen ab und setzen Sie sie nur in Ihre trockenen Ohren ein.

- Sollten Ihre Hörsysteme einmal feucht geworden sein, trocknen Sie diese auf keinen Fall mit einer Wärmequelle (z. B. Elektroherd, Mikrowelle, Fön). Hohe Temperaturen können Ihre Hörgeräte beschädigen.
- Um Feuchtigkeit, die sich tagsüber in Hörgeräten sammeln kann, abzubauen, sollten Sie über Nacht die Batteriefächer öffnen und die Batterien herausnehmen. Wenn möglich, legen Sie Ihre Hörsysteme in eine Trockenstation oder einen Trockenbecher.
- Bei therapeutischen Behandlungen mit Wärme, Strahlen oder mit anderen Geräten legen Sie Ihr Hörsystem unbedingt in einem Nebenraum ab.
- Wechseln Sie regelmäßig die Batterie aus. Gehen Sie hierbei wie folgt vor: Folie abziehen, mindestens zwei Minuten liegen lassen – Ihre Batterie tankt jetzt Sauerstoff – und dann erst einsetzen. Bitte achten Sie auf den richtigen Sitz der Batterie in den Hörsystemen. Im Idealfall verwenden Sie nur hochwertige Markenprodukte, über die wir Sie gerne beraten.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, Ihre Hörsysteme zu öffnen. Reparaturen dürfen nur vom Hörgeräteakustiker durchgeführt werden.

Rundum gut gepflegt – erhöht die Lebensdauer Ihrer Hörsysteme.

Reinigen Sie Ihre Hörsysteme mit einem weichen Tuch und die Schallaustrittsöffnungen vorsichtig mit einer kleinen Bürste. Achten Sie darauf, dass Sie dabei in keine Öffnungen oder Einbuchtungen drücken.

- Bitte benutzen Sie zur Reinigung nur die dafür vorgesehenen Pflegeprodukte. Verwenden Sie niemals Alkohol, Lösemittel oder andere Reinigungsmittel.
- Legen Sie Ihre Hörsysteme niemals in Wasser oder in eine Reinigungsflüssigkeit.
- Achten Sie bei der Verwendung von Reinigungsspray darauf, dass keine Flüssigkeit in Öffnungen oder Einbuchtungen gerät! Die Öffnungen sollten regelmäßig von Ihrem Hörgeräteakustiker gereinigt werden.

Batterien – die Energiequellen für Ihre Hörsysteme

- Nehmen Sie Batterien niemals in den Mund! Halten Sie die Batterien deshalb von Kindern und geistig behinderten Personen fern. Falls versehentlich eine Batterie verschluckt wurde, suchen Sie bitte unverzüglich einen Arzt auf!
- Verwenden Sie stets frische Batterien und nehmen Sie diese aus dem Gerät heraus, wenn Sie das Hörsystem längere Zeit nicht benutzen.
- Auslaufende Batterien sind sofort zu tauschen, und die Hörsysteme sollten umgehend von Ihrem Akustiker geprüft und gereinigt werden.
- Verbrauchte Batterien geben Sie bitte zur fachgerechten Entsorgung an uns zurück. Batterien gehören auf keinen Fall in den Hausmüll, da die darin enthaltenen Stoffe der Umwelt Schaden zufügen können.
- Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen. Handelsübliche Hörgeräte-Batterien sind dazu nicht vorgesehen und können bei dem Versuch aufgeladen zu werden, explodieren oder einen Brand verursachen.

Spezielle Tipps für *Hinter-dem-Ohr*-Hörgeräte

Der Verbindungsschlauch zwischen den Ohrpassstücken und den Hörgeräten wird mit der Zeit hart und spröde. Damit die Schallübertragung und der Klang der Hörsysteme nicht beeinträchtigt werden, empfiehlt es sich, den Verbindungsschlauch ca. alle drei Monate durch Ihren Hörgeräteakustiker austauschen zu lassen.



Spezielle Tipps für *Ex-Hörer*-Geräte

Zum Schutz der empfindlichen Ex-Hörer sind die Ohrstücke mit kleinen Filtern versehen. Sie verhindern, dass Ohrenschmalz in den Hörer eindringen und ihn verstopfen kann. Dieser Filter muss regelmäßig ersetzt werden, spätestens jedoch, wenn sich die Klangqualität geändert hat. Ihr Hörgeräteakustiker zeigt Ihnen gerne, wie Sie den Filter selbst wechseln können, oder erledigt dies für Sie bei Ihrem nächsten Besuch im Fachgeschäft.



Spezielle Tipps für *Im-Ohr*-Hörgeräte

An der Schallöffnung der Hörgeräte befindet sich ein kleiner Filter. Er verhindert, dass Ohrenschmalz in die Hörgeräte eindringen kann. Dieser Filter muss regelmäßig ersetzt werden. Ihr Hörgeräteakustiker zeigt Ihnen gerne, wie Sie den Filter selbst wechseln können, oder erledigt dies für Sie bei Ihrem nächsten Besuch im Fachgeschäft.



Falls einmal etwas nicht funktioniert

Trotz der besten Pflege und sorgfältigster Behandlung Ihrer Hörsysteme können Störungen oder Defekte an den Geräten nicht vollständig ausgeschlossen werden, da die Systeme sehr starken Belastungen ausgesetzt sind.

In der folgenden Übersicht finden Sie einige der typischen Fehlerursachen, die dafür sorgen, dass Ihre Hörgeräte einmal nicht richtig funktionieren können. Sollten die vorgeschlagenen Lösungen keine Verbesserung der Situation bringen, dann wenden Sie sich zur Behebung der Fehler jederzeit gerne an Ihren HÖREX HörExperten.

Das Hörgerät verursacht Schmerzen im Ohr:

Mögliche Fehlerursache

- Das Hörgerät ist nicht richtig ins Ohr eingesetzt.

Lösung

Entfernen Sie das Hörgerät und setzen Sie es erneut ein. Besteht das Problem weiterhin, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker.

Das Hörgerät ist nicht laut genug:

Mögliche Fehlerursache

- Die Batterie ist bereits zu schwach.
- Die Schallöffnung des Hörsystems ist mit Ohrenschmalz verstopft.
- Die Mikrofonöffnung ist verstopft.

Lösung

Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Reinigen Sie das Ohrpasstück oder wechseln Sie den Cerumen-Filter.

Bitten wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Hörgeräteakustiker.

Das Hörgerät hat Unterbrechungen:

Mögliche Fehlerursache

- Die Batterie ist fast leer oder defekt.
- Es liegt ein Fehler in der Elektronik vor.

Lösung

Setzen Sie eine neue Batterie ein.

Wenden Sie sich an Ihren Akustiker für eine fachgerechte Kontrolle des Hörgerätes.

Das Hörgerät pfeift:

Mögliche Fehlerursache	Lösung
<ul style="list-style-type: none">• Das Hörgerät ist nicht richtig eingesetzt.	Setzen Sie Ihr Hörgerät erneut ins Ohr ein.
<ul style="list-style-type: none">• Es befindet sich ein Fremdkörper (Ohrenschmalz) im Ohr.	Lassen Sie Ihr Ohr kontrollieren. Bei Ohrenschmalz im Ohr sollten Sie den Gehörgang durch den HNO-Arzt reinigen lassen.
<ul style="list-style-type: none">• Der Schlauch zum Ohrpasstück ist zu kurz, so dass der Sitz nicht mehr stimmt.	Lassen Sie den Schlauch bei Ihrem Hörgeräteakustiker erneuern bzw. tauschen Sie den Schlauch selbst aus.
<ul style="list-style-type: none">• Die Schale oder das Ohrpasstück sitzt nicht mehr richtig im Gehörgang.	Da sich das Ohr verändern kann, muss ggf. die Schale oder das Ohrpasstück erneuert werden.
<ul style="list-style-type: none">• Das Hörgerät ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Hörgeräteakustiker für eine fachgerechte Reparatur des Hörgerätes.

Das Hörgerät sitzt nicht mehr gut im Ohr:

Mögliche Fehlerursache	Lösung
<ul style="list-style-type: none">• Die Schale oder das Ohrpasstück sitzt nicht mehr richtig bzw. ist zu locker.	Da sich das Ohr verändern kann, muss ggf. die Schale oder das Ohrpasstück erneuert werden.

Das Hörgerät funktioniert nicht:

Mögliche Fehlerursache	Lösung
<ul style="list-style-type: none">• Die Batterie ist verbraucht.	Setzen Sie eine neue Batterie ein.
<ul style="list-style-type: none">• Die Schallöffnung des Hörsystems ist mit Ohrenschmalz verstopft.	Reinigen Sie das Ohrpasstück oder wechseln Sie den Cerumen-Filter.
<ul style="list-style-type: none">• Das Hörgerät ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Akustiker für eine fachgerechte Reparatur des Hörgerätes.



Weil Hörsysteme eine besondere Pflege brauchen, bietet die HÖREX eine speziell für die hochwertigen Hörsysteme entwickelte eigene Pflegeserie an: perfekt aufeinander abgestimmte Produkte zur optimalen Reinigung und Pflege.

Muss ich mein Hörsystem täglich reinigen?

Natürlich ist es kein Drama, wenn Sie Ihr Hörsystem mal einen Tag nicht reinigen, aber Sie sollten schon auf regelmäßige Pflege achten. Denn ohne tägliche Reinigung und Pflege kann Ihr hochwertiges Hörsystem irreparabel geschädigt werden. Schließlich ist es tagein, tagaus vielen Einflüssen ausgesetzt.

Mit den richtigen Pflegeprodukten werden Sie lange Freude an Ihrem Hörsystem haben. Die HÖREX Pflegeserie wurde speziell für die Reinigung und optimale Pflege moderner Hörsysteme entwickelt. Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Produkte vorstellen. Die HÖREX Pflegeserie erhalten Sie exklusiv in unserem Fachgeschäft.

Die HÖREX Pflegeprodukte

Reinigungstabletten

für Ohrpasstücke

Trockenkapseln

für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Desinfektionsspray

für Hörsysteme und Ohrpasstücke

Desinfektionstücher

für Hörsysteme und Ohrpasstücke

Reinigungsbecher

zur Reinigung von HdO-Ohrpasstücken

Trockenbecher

zum Trocknen von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Airball/Puster

zum Ausblasen von Schallschläuchen, Schall- und Belüftungskanälen

Pflegetasche

zur Aufbewahrung Ihrer Pflegeprodukte

Detaillierte Informationen zur Handhabung dieser Produkte finden Sie in der der Pflegeserie beigefügten Reinigungs- bzw. Trocknungsanleitung und auf den folgenden Seiten.

Die praktischen HÖREX Pflege-Sets

Starter-Set I (IdO)

für Hörsysteme und Ohrpasstücke

- 5 einzeln verpackte Reinigungstücher
- 2 Trockenkapseln
- 1 Trockenbecher

Trockenkapsel-Set

für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

- 4 Trockenkapseln
- 1 Trockenbeutel

Starter-Set II (HdO)

für Hörsysteme und Ohrpasstücke

- 5 einzeln verpackte Reinigungstücher
- 2 Trockenkapseln
- 1 Trockenbeutel
- 1 Airball/Puster

Reinigungs-Set

für Ohrpasstücke

- 8 Reinigungstabletten
- 1 Reinigungsbecher mit Sieb
- 1 Airball/Puster

Anleitung zur
Reinigung und **Trocknung**
Ihres HdO- oder IdO-Hörsystems



Bedienungsanleitung Reinigung

Reinigung von HdO-Ohrstücken mit **Reinigungstabletten**

Das Hörgerät darf niemals in die Reinigungsflüssigkeit gelegt werden (Bild 1)!

Achtung! Tablette nicht einnehmen!

Ohrpasstück 2 x wöchentlich reinigen.

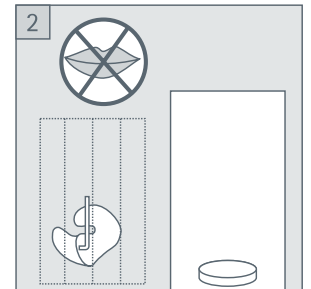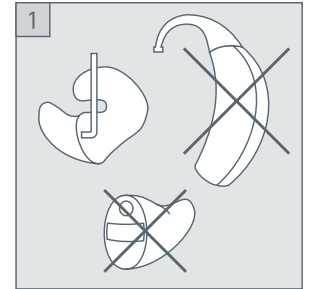



Bedienungsanleitung Reinigung

Reinigung von HdO-Ohrstücken mit **Reinigungstabletten**

Lösen Sie den Schallschlauch vom Gerät (Bild 1) und nehmen Sie das Sieb aus dem Reinigungsbecher (Bild 2).

Reinigungstablette


Füllen Sie den Reinigungsbecher etwa zu 3/4 mit Wasser auf und geben Sie eine Reinigungstablette hinzu. Ihre Reinigungsflüssigkeit ist nun einsatzbereit.

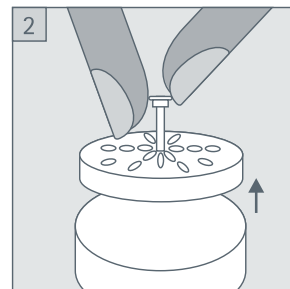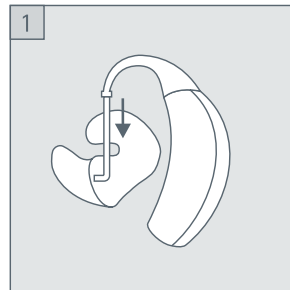

Bedienungsanleitung Reinigung

Reinigung von HdO-Ohrstücken mit **Reinigungstabletten**



Um die Reinigung Ihres HdO-Ohrstückes durchzuführen, legen Sie das Ohrstück mit dem Schallschlauch auf das Sieb. **Wichtig: Nicht das Hörsystem auf das Sieb legen!** Tauchen Sie das Sieb mit Ohrstück und Schallschlauch für fünf Minuten in die Flüssigkeit (Bild 3).

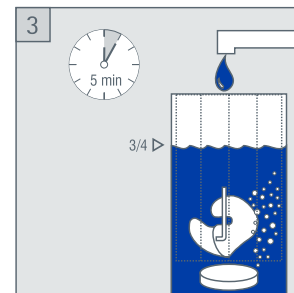

Bedienungsanleitung Reinigung

Reinigung von HdO-Ohrstücken mit **Reinigungstabletten**



Nehmen Sie das Sieb nach fünf Minuten aus der Reinigungsflüssigkeit heraus und reinigen Sie das Ohrstück und den Schallschlauch mit klarem Wasser (Bild 4). Trocknen Sie beides anschließend mit einem trockenen Tuch gut ab (Bild 5).

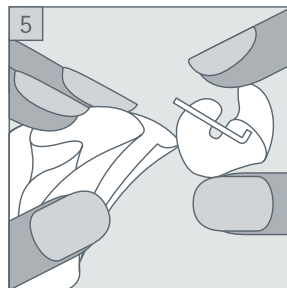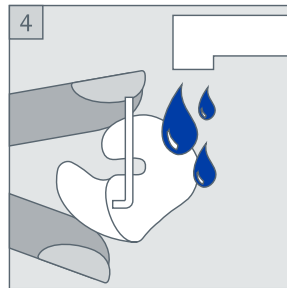

Bedienungsanleitung Reinigung

Reinigung von HdO-Ohrstücken mit **Reinigungstabletten**

Um die restliche Flüssigkeit aus Schallschlauch und Ohrstück zu entfernen, nehmen Sie den Puster, stecken Sie ihn in den Schallschlauch und entfernen Sie die restliche Flüssigkeit durch kräftiges Drücken (Bild 6). Setzen Sie den Schallschlauch anschließend wieder an das Gerät (Bild 7).

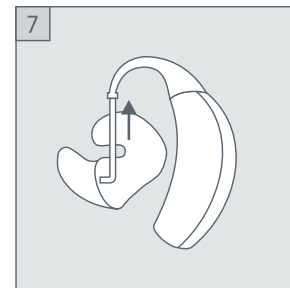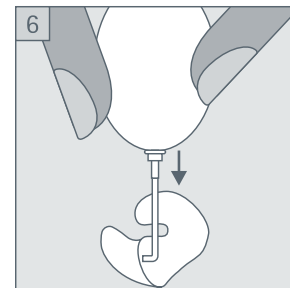

Bedienungsanleitung Reinigung



Desinfektionsspray für Hörsysteme und Ohrpasstücke

Auftragen und vollständig benetzen (Bild 1) und nach 1 Minute Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben (Bild 2). Nach der Reinigung trocknen Sie das Hörsystem wie auf den Seiten 26–30 beschrieben.

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und HBV. Nicht in die Hörer- oder Mikrofonöffnung sprühen! Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen sprühen!



Hautberührende Gegenstände (z. B. Hörgeräte, Otoplastiken) nach der Desinfektion unbedingt mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben.

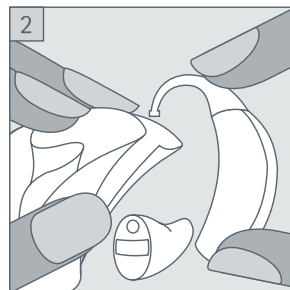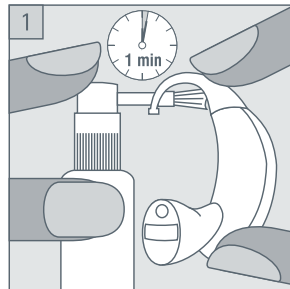

Bedienungsanleitung Reinigung



Desinfektionstücher für Hörsysteme und Ohrpasstücke

Das Hörsystem und das Ohrpasstück gründlich mit dem Tuch abreiben (Bild 1). Nach 1 Minute Einwirkzeit mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben (Bild 2). Nach der Reinigung trocknen Sie das Hörsystem wie auf den Seiten 26–30 beschrieben.

Wirksam gegen Bakterien, Pilze und HBV. Nicht in die Hörer- oder Mikrofonöffnung sprühen! Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen sprühen!



Hautberührende Gegenstände (z. B. Hörgeräte, Otoplastiken) nach der Desinfektion unbedingt mit einem saugfähigen Tuch trockenreiben.

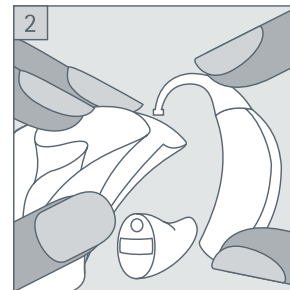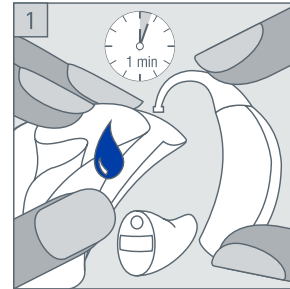


Bedienungsanleitung Trocknung

Trockenbeutel für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Nehmen Sie bitte vor der Trocknung die Batterie aus Ihrem Hörgerät (Bild 1). Die Kapsel ist so lange wiederverwendbar, bis sich der goldgelbe Farbindikator weißlich verfärbt hat. Entnehmen Sie nun die Trockenkapsel aus der Packung (Bild 2).

Achtung! Kapsel nicht öffnen!
Kapsel nicht einnehmen!
Hörgerät täglich trocknen.

Zusammensetzung:
Kieselgel mit Farbindikator
(absolut ungefährlich).

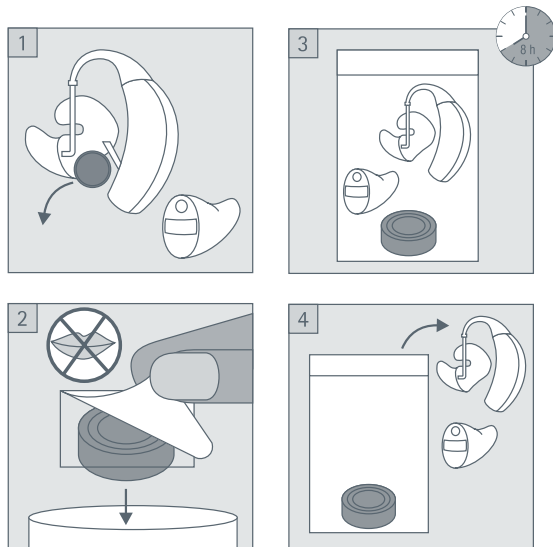

Bedienungsanleitung Trocknung

Trockenbeutel für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Öffnen Sie den Trockenbeutel und legen Sie das HdO-/IdO-Hörsystem und das Ohrstück mit einer Trockenkapsel hinein (Bild 3). Legen Sie den Beutel mit der Aufschrift nach oben vor sich hin und streichen Sie die Luft heraus. Schlagen Sie nun die obere Kante einmal um, sodass beide Klettverschlüsse nach vorn zeigen. Durch ein weiteres Umschlagen liegen beide Klettverschlüsse übereinander. Drücken Sie sie gut fest. Der Trockenbeutel ist nun ausreichend verschlossen.

Nach einer ausreichenden Trockenzeit von acht Stunden können Sie Ihr Hörsystem und Ohrstück aus dem Trockenbeutel herausnehmen. Die Trockenkapsel zur weiteren Verwendung im Beutel belassen (Bild 4).

Wichtig!

Den Beutel mit der Trockenkapsel nach jedem Gebrauch gut verschließen, damit die Trockenkapsel keine Umgebungfeuchtigkeit aufnimmt.

Bedienungsanleitung Trocknung


Trockenbecher für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Nehmen Sie bitte vor der Trocknung die Batterie aus Ihrem Hörgerät (Bild 1). Die Kapsel ist so lange wiederverwendbar, bis sich der goldgelbe Farbindikator weißlich verfärbt hat. Entnehmen Sie nun die Trockenkapsel aus der Packung (Bild 2).

Achtung! Kapsel nicht öffnen!
Kapsel nicht einnehmen!
Hörgerät täglich trocknen.

Zusammensetzung:
Kieselgel mit Farbindikator
(absolut ungefährlich).

28

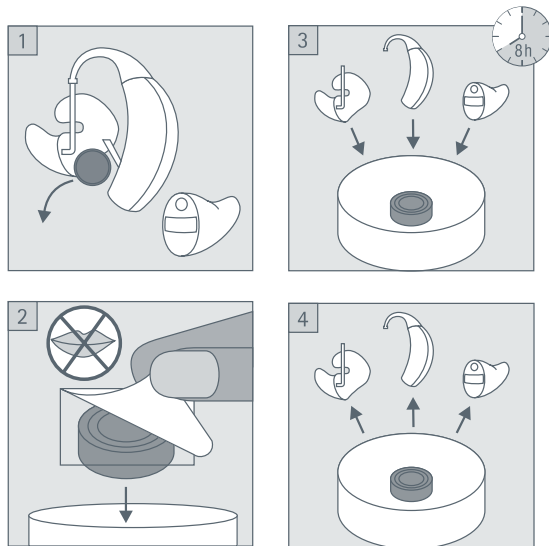

Bedienungsanleitung Trocknung

Trockenbecher für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Öffnen Sie den Trockenbecher und legen Sie das HdO-/IdO-Hörsystem und das Ohrstück mit einer Trockenkapsel hinein (Bild 3). Verschließen Sie den Becher gut, sodass keine Öffnung vorhanden ist.

Nach einer ausreichenden Trockenzeit von acht Stunden können Sie Ihr Hörsystem und das Ohrstück aus dem Trockenbecher herausnehmen. Die Trockenkapsel zur weiteren Verwendung im Becher belassen (Bild 4).

Wichtig!

Den Becher mit der Trockenkapsel nach jedem Gebrauch gut verschließen, damit die Trockenkapsel keine Umgebungsfeuchtigkeit aufnimmt.

29



Bedienungsanleitung Trocknung

Elektrische Trockenstation für die Trocknung von Hörsystemen und Ohrpasstücken

Für die Komfort-Trocknung Ihrer Hörsysteme ohne Zusatzstoffe empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer elektrischen Trockenstation.

Nehmen Sie bitte vor der Trocknung die Batterie aus Ihrem Hörgerät (Bild 1). Legen Sie Ihr HdO-/IdO-Hörsystem mit geöffnetem Batteriefach in die Trockenstation. Schließen Sie die Station an und betätigen Sie die Starttaste. Der Trockenvorgang beginnt. Sobald dieser beendet ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Die elektrische Trockenstation gibt es auch mit UV-C-Licht. UV-C Licht reduziert die Keimansammlung auf Hörsystemen, Ohrpasstücken etc. und setzt das Risiko einer Hautinfektion im Ohr herab.

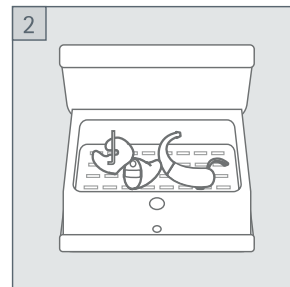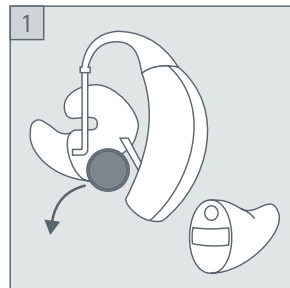

Ob Sie nun in Deutschland irgendwo im Urlaub weilen, beruflich unterwegs sind oder in eine andere Stadt umziehen – einen HÖREX Mitgliedsfachbetrieb finden Sie sicher immer ganz in Ihrer Nähe.

Der HÖREX Service-Verbund

Schließlich haben sich in dem leistungsstarken Verbund mehr als 500 Mitgliedsfachgeschäfte zusammengeschlossen, um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten. Ganz nach der Devise: Gemeinsam unerhört leistungsstark.

Welche Vorteile Sie dadurch genießen und wofür der HÖREX Service-Verbund steht, kann sich wirklich hören lassen. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Leistungsfähigkeit unter

www.myhoerex.de



Mitglied der Leistungsgemeinschaft

HÖREX
Ihre HörExperten

Wir sind Mitglied der Leistungsgemeinschaft **HÖREX** über 500x in Deutschland · www.hoerex.de
Ihre HörExperten